




SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

COMPACT

BAIGNOIRE D'HYGIÈNE

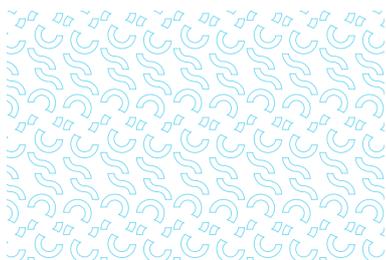

scemed.com

BAIGNOIRE COMPACT

ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

Baignoire à hauteur variable pour les soins d'hygiène
Remplissage automatique* de la cuve pour se consacrer
pleinement aux patients/résidents.

*En option



LES + PRODUIT




- Remplissage automatique de la cuve
- Transfert intégré avec assise confortable et sans risque de glissement
- Gestion simplifiée des fonctions par le tableau de commande tactile
- Options bien-être

Personnes autonomes
à dépendantes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

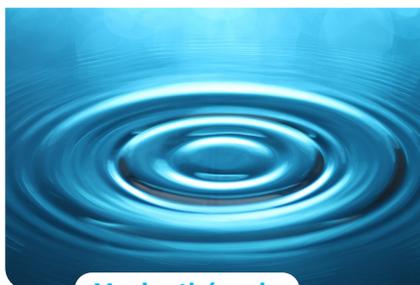

Musicothérapie

Un moment de détente et d'harmonie pour le corps et l'esprit grâce aux vibrations des basses fréquences dans l'eau qui procurent un massage par ondes sonores.



Chromothérapie

La chromothérapie utilise les couleurs dans le but de soigner le corps et l'esprit. Chaque couleur prodigue un effet à la fois physique et psychique qui participe à la détente et au bien-être.



Hydromassage 2 jets

Au-delà de leur effet relaxant, les jets d'eau ont une action revitalisante et permettent d'améliorer le bien-être du patient/résident.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la cuve	L. 2065 x P. 810 mm	Matériaux	<ul style="list-style-type: none">• Cuve anatomique en fibre de verre• Châssis en acier inoxydable recyclable
Réglage de la hauteur	<ul style="list-style-type: none">• Baignoire à hauteur variable : 685 à 935 mm• Baignoire à hauteur fixe : hauteur ajustable manuellement de 50 à 250 mm	Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none">• Eau chaude et froide raccord 3/4 "• Manchon de raccordement pour l'évacuation : DN 50• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz - 10A
Capacité de la cuve	250 L	Normes	<ul style="list-style-type: none">• Marquage CE selon la directive 93/42/CEE• NF EN 60601-1 (Appareils électromédicaux exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles)• ISO 90001 : management de la qualité• Indice de protection : IP24
Poids	150 Kg		
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none">• Système de désinfection• Sécurité anti-brûlure par blocage à 38°C• Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage• Descente d'urgence		

MODÈLES

Baignoire COMPACT à hauteur fixe

Réf. : **631.248**

Baignoire COMPACT à hauteur variable

Réf. : **631.249**

OPTIONS

- ✓ **Système de désinfection**
- ✓ **Réducteur de cuve**
- ✓ **Remplissage automatique**
- ✓ **Hydromassage (2 jets)**
- ✓ **Musicothérapie**
- ✓ **Chromothérapie** avec défilement de couleurs (1 spot)
- ✓ **Ultrasons**
- ✓ **Sound & vision (3 spots)**

✓ Disponible sur les deux modèles : fixe et variable

✓ Disponible uniquement sur le modèle à hauteur variable



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com