



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL



PULSO | BROYEUR

PULSO

BROYEUR

Une solution simple et rapide de traitement des déchets biologiques et une utilisation sans les mains pour un risque d'infections réduit.



Les points forts


- 1. Risques d'infections et contaminations croisées limités.**
- 2. Temps de travail du personnel soignant optimisé.** Gestion du propre et du sale simplifiée.
- 3. Utilisation plus économique :** fonctionne avec peu d'eau et d'électricité.
- 4. Respect de l'environnement :** les consommables sont en papier 100% recyclé.
- 5. Utilisation 100% automatique,** sans les mains.
- 6. Capacité :** jusqu'à 4 urinaux, bassins ovales ou 2 bassins 3L multi-usages.



Caractéristiques générales

- Capacité : jusqu'à 4 urinaux, bassins ovales ou 2 bassins 3L multi-usages.
- Durée de cycle : 85 secondes.
- Consommation d'eau : 13 l par cycle en moyenne
- Consommation d'électricité par cycle très basse : 0.015 Kwh, eau froide uniquement.
- Instructions vocales.

Dimensions : **500 x 1040 x 623 mm**
 Dim. couvercle ouvert : **500 x 1400 x 623 mm**
 Poids brut (emballé) : **95 kg**
 Poids net : **84.5kg**
 Electricité : **230 V / 50 Hz** – disjoncteur 13A minimum
 Evacuation au sol : **40/50 ou 100 mm**
 Détecteur de trop plein intégré : **Oui**
 Puissance sonore : **54 dcb**

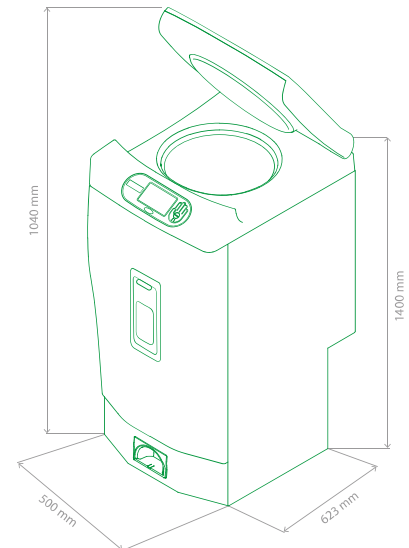

Technologie "mains libres"



Système d'ouverture, de fermeture du couvercle et de démarrage automatique, grâce aux capteurs au niveau de la pédale et sur l'écran de contrôle.



3 options de démarrage de cycle 100 % automatique :


- Pédale pour ouvrir le couvercle et démarrage automatique du cycle.
- Pédale pour ouvrir le couvercle et capteur sur l'écran pour lancer le cycle.
- Pédale pour ouvrir le couvercle et pédale à nouveau pour lancer le cycle.

Consommables

A base de papier et de journaux recyclés !




Urinal bombé
875 ml
REF. : 2310001

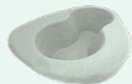

Bassin de chaise ovale 2L
REF. : 2310002



Support réutilisable pour bassin ovale
REF. : 2310006

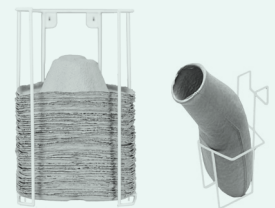

Distributeur d'urinal bombé
REF. : 2310013



Bassin de chaise 1.7 L
REF. : 2310003



Bassin rond multi-usages
1L REF. : 2310004
3L REF. : 2310005



Chiffons secs biodégradables
REF. : 2310007



Lingettes humides biodégradables
REF. : 2310008

Désinfectant 5L
REF. : 2310009

Sacs en papier
REF. : 2310010

Sachets hydrosolubles absorbants
REF. : 2310011

Casier verrouillable pour désinfectant
REF. : 2310012

Support/distributeur d'urinaux bombés
REF. : 2310014

Distributeur de bassins
Ovales REF. : 2310015
Chaise REF. : 2310016
Multi-usages REF. : 2310017



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com