



BAIGNOIRES

GAMME BIEN-ÊTRE



HYGIÈNE



Améliorer la vie des personnes
en perte d'**autonomie**
et de ceux qui en **prennent soin**.



BAIGNOIRES THÉRAPEUTIQUES

LE BIEN-ÊTRE MÉDICAL PAR SCEMED

La gamme de baignoires bien-être a été développée pour faciliter le bain des personnes dépendantes et désorientées. Nos baignoires sont adaptées aux établissements qui souhaitent proposer des soins de détente et de relaxation sur mesure grâce aux thérapies naturelles disponibles en option.



La qualité française

Nos baignoires sont fabriquées dans notre unité de production située dans les Hauts de France : un gage de qualité et d'innovation pour des baignoires exclusives et made in France.

▶ QUALITÉ

Nous utilisons les matériaux les plus nobles et robustes pour vous proposer des équipements haut de gamme. Notre gamme de baignoires bien-être est conforme aux normes françaises et européennes en vigueur.

▶ EXPERTISE

Notre équipe bénéficie d'une expertise de longue date dans la conception de baignoires. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires médicaux pour proposer des équipements adaptés à l'utilisateur et à l'accompagnant.

▶ BIEN-ÊTRE

Nos baignoires sont conçues avec à l'esprit l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et l'amélioration de la prise en charge des patients/résidents. En effet, notre gamme de baignoires permet une prise en charge axée sur le bien-être, la stimulation sensorielle et la thérapie non médicamenteuse.






Bateia

ACCESSIBLE ET SÉCURISANTE


La BATEIA a été conçue pour faciliter l'accès au bain et rassurer.

Les patients/résidents, grâce à sa porte escamotable et son utilisation sans bascule.

Elle répond à tous vos besoins de qualité, de sécurité et d'ergonomie de travail.

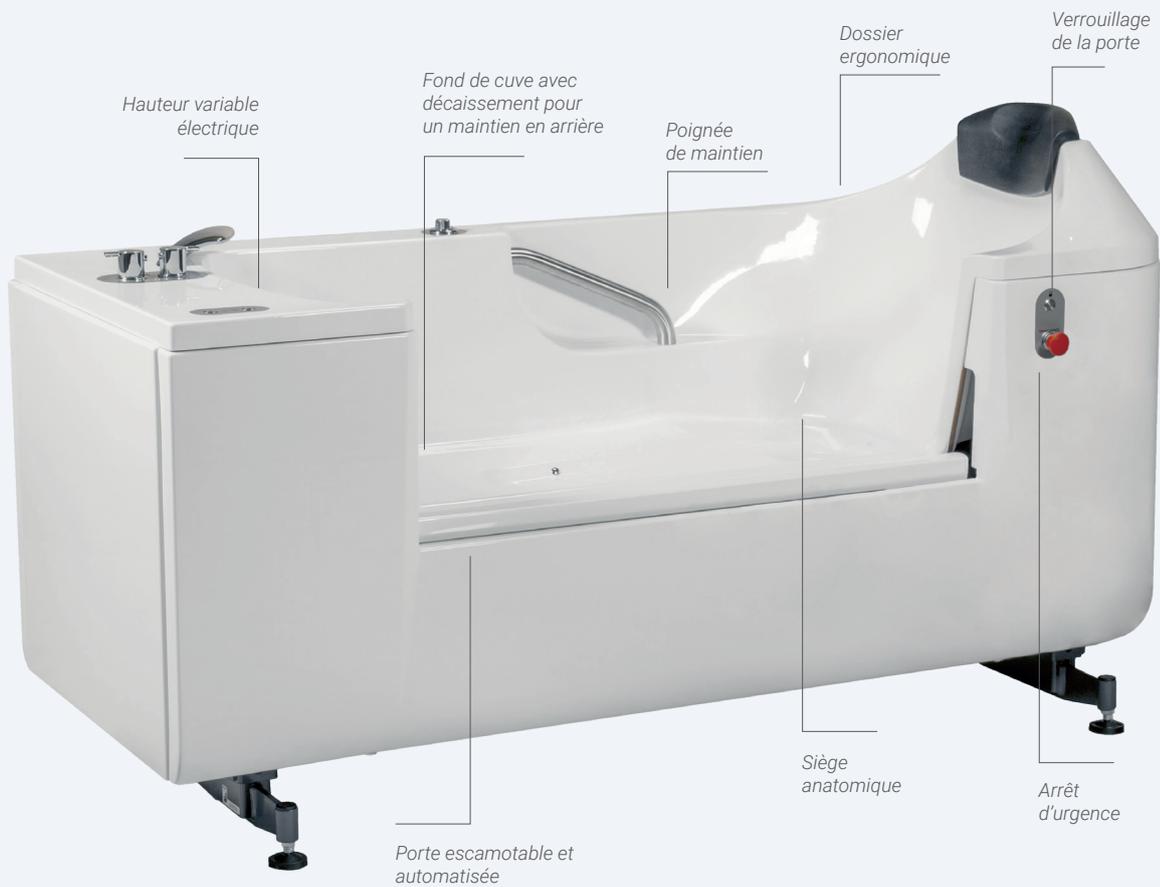

La porte escamotable et automatisée

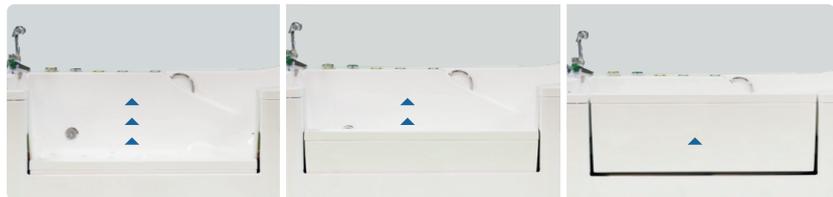

Systèmes de transfert compatibles



Déambulateur



Lève-personnes mobile



Transfert sur rail



Verticalisateur



Informations techniques

📏 210 kg

💧 178 L

Dimensions extérieures : L.1856 x l.808 x H.1020 mm

Dimensions intérieures : L.1500 x l.450 x H.350 mm (H.550 mm au plus haut du dossier)

Réglage de la hauteur : de 860 mm à 1160 mm

Hauteur de transfert au bas de la porte ouverte : de 530 mm à 830 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège ergonomique intégré. • Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Electrovanne de sécurité de porte. • Système de sécurité verrouillage de porte. • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2" - robinetterie standard à blocage thermostatique. • Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage CE 93/42 MDD. • Directive «Machines» 89/392 CEE. • Directive «Basse tension» 73/23 CEE. • Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides). • EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines). • EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).



Aromathérapie olfactive

Fonctions tactiles :

- Réglage de la balnéothérapie et de la chromothérapie
- Affichage température de l'eau, indicateur de désinfection



Lanira

DESIGN & BIEN-ÊTRE

Idéalement positionnée au centre de votre espace bain pour **faciliter la circulation et la réalisation des soins**. La Lanira offre un aspect cocon totalement démedicalisé avec ses formes arrondies.



Une cuve symétrique permettant de positionner le résident tête à droite ou à gauche.



Remplissage cascade



Aromathérapie olfactive



Douchette intégrée à la cuve

Systèmes de transfert compatibles



Novum 1000, transfert assis



Lève-personnes mobile



Transfert sur rail



Informations techniques

🏠 250 kg

💧 297 L

Dimensions extérieures : L.1929 x l.920 x H.840 mm

Dimensions intérieures : L.1495 x l.500 x P.750 mm

Réglage de la hauteur : de 750 mm à 1050 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré. • Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2" - robinetterie standard à blocage thermostatique • Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage CE 93/42 MDD. • Directive «Machines» 89/392 CEE. • Directive «Basse tension» 73/23 CEE. • Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides). • EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines). • EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).



Buses de balnéothérapie réparties sur l'ensemble de la cuve


Gestion des fonctions simplifiée par commandes tactiles rétro-éclairées



Indra

STABILITÉ ET CONFORT

La baignoire Indra intègre une **cuve anatomique décaissée** et deux poignées de maintien pour assurer une **stabilité et un positionnement parfaits** pendant les soins.

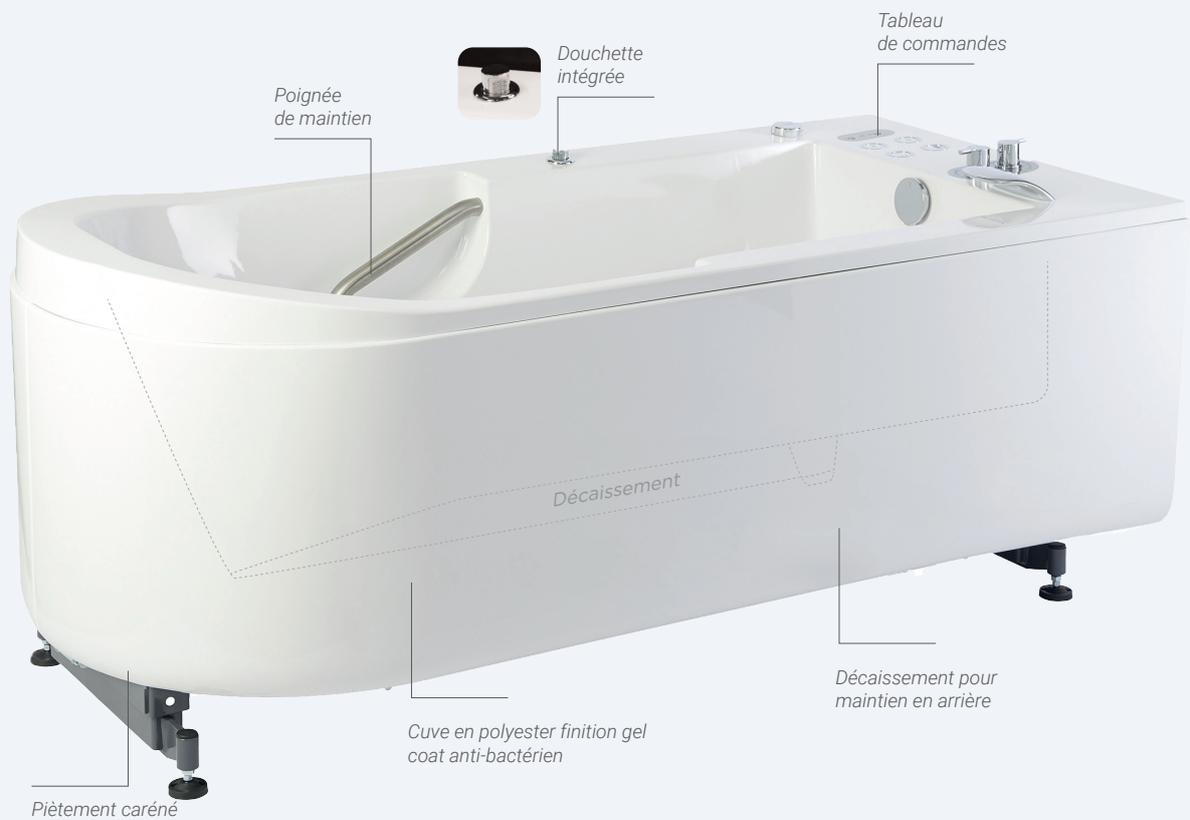

Cale-pieds multiposition disponible



Une cuve anatomique et décaissée, compatible avec nos systèmes de transfert de bain.

Systèmes de transfert compatibles



Novum 1000, transfert assis



Lève-personnes mobile



Transfert sur rail



Informations techniques

182 kg


326 L

Dimensions extérieures : L.1912 x l.912 x H.780 mm

Dimensions intérieures : L.1560 x l.500 x P.730 mm

Réglage de la hauteur : de 730 mm à 1030 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège ergonomique intégré. • Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C. • Fond de cuve avec décaissement de l'assise et surélévation des jambes pour une stabilité parfaite du résident dans le bain.
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2" - robinetterie standard à blocage thermostatique. • Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage CE 93/42 MDD. • Directive «Machines» 89/392 CEE. • Directive «Basse tension» 73/23 CEE. • Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides). • EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines). • EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).

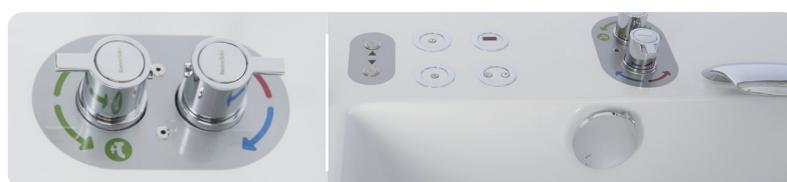

Robinetterie

Tableau de commandes tactiles et système de pré-remplissage



Harmonia

LE BIEN-ÊTRE ALLONGÉ

La baignoire Harmonia possède une cuve XXL qui offre un espace suffisant pour un bain en position allongée et une totale liberté de mouvements.



Systèmes de transfert compatibles



Déambulateur



Lève-personnes mobile



Transfert sur rail



Verticalisateur



Hauteur réglable

Informations techniques

⚖️ 200 kg

💧 400 L

Dimensions extérieures : L.2312 x l.1840 x H.980 mm

Dimensions intérieures : L.1920 x l.1670 x P.710 mm

Réglage de la hauteur : de 710 mm à 1010 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré. • Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2" - robinetterie standard à blocage thermostatique. • Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage CE 93/42 MDD. • Directive «Machines» 89/392 CEE. • Directive «Basse tension» 73/23 CEE. • Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides). • EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines). • EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).



Chromothérapie

Tableau de commandes tactiles et robinetterie



BALNÉOTHÉRAPIE

BIEN-ÊTRE POUR LE CORPS ET L'ESPRIT

La balnéothérapie à air chauffé ou à eau, procure un massage de tout le corps et une relaxation profonde. Elle favorise la détente musculaire, la circulation sanguine et le drainage lymphatique.



BALNÉO AIR

L'air, un effet relaxant et stimulant !

Les buses réparties sur l'ensemble de la cuve propulsent des bulles d'air chaudes qui massent les jambes sur toute la longueur.

BALNÉO EAU

L'EAU, un effet massant et ciblé !

Propulsion d'eau par hydrojets de puissance réglable, placés de façon ciblée sur les lombaires, les jambes et la voûte plantaire.



LES PLUS PRODUIT

Les baignoires sont équipées de la désinfection FLASH. Après le bain, le système se déclenche automatiquement et désinfecte les circuits internes. Sans risque de contamination croisée.

- ▶ **SILENCIEUX**
- ▶ **AIR CHAUD**
- ▶ **DÉSINFECTION AUTOMATIQUE**



LES BALNÉO

CHOISISSEZ VOTRE BALNÉOTHÉRAPIE

SCEMED propose différents packs de balnéothérapie. Avec jets d'eau, jets d'air ou combinaison des deux.

ZEN

- 2 jets d'eau orientables (voûte plantaire)
- 36 nano jets d'eau au niveau des lombaires
- 24 nano jets d'air en fond de cuve (jambes)
- 10 jets d'eau «PRISME» en fond de cuve (jambes)
- Programme jet continu et alternatif
- Système air et eau séparé ou combiné
- Système silencieux
- Chromothérapie et Aromathérapie

LISSE

- Bain bouillonnant silencieux à air pulsé
- 24 Nano jets d'air extra plats
- Répartition des bulles dans toute la cuve
- Système silencieux
- Chromothérapie et Aromathérapie

REVA

Pour baignoires Harmonia et Lanira

- 6 jets d'eau latéraux
- Réglage simple avec gradation de la puissance
- Programme jet continu et alternatif
- Chromothérapie et Aromathérapie



AROMATHÉRAPIE

Elle utilise les huiles essentielles pour traiter les pathologies. Chaque huile a une signature spécifique pour agir sur les troubles émotionnels : stress, anxiété, etc. La diffusion des huiles se fait par le système de ventilation de la baignoire, sans aucun contact avec la peau.

FORMEZ-VOUS À L'AROMATHÉRAPIE !

Des recettes cutanées et olfactives simples à utiliser pour proposer un soin adapté à vos patients. Scemed vous propose un système exclusif de diffusion par ventilation.

CHROMOTHÉRAPIE

INITIEZ-VOUS À LA CHROMOTHÉRAPIE !

Notre guide vous suggère des ambiances couleurs pour favoriser la détente, le lâcher-prise, la sérénité ou la stimulation.

- Défilement de 256 couleurs.
- Projection dans l'espace bain.
- Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur.

MUSICOTHÉRAPIE

PERSONNALISEZ L'ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !

Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue un massage par ondes sonores, offrant un moment de détente et d'harmonie pour le corps et l'esprit. Les vibrations des basses fréquences dans l'eau procurent un massage par ondes sonores et créent une atmosphère apaisante et une expérience unique. (Radio, port USB et système Bluetooth disponibles).



VOTRE PROJET EST UNIQUE !

En tant qu'agencier de salle de bains, nous vous proposons des solutions sur-mesure pour optimiser les espaces de travail selon vos besoins et les équipements nécessaires.

Nos conseillers et notre bureau d'études composés d'architectes sont disponibles pour vous accompagner :

- ▶ Préconisations techniques et conseils en ergonomie, réalisation de plans et projections 3D.
- ▶ Notre guide architecte est disponible pour vous aider dans l'agencement de vos espaces bains.



Votre touche personnelle

Choisissez votre univers détente parmi nos 6 sérigraphies !

Notre book sérigraphies est disponible sur demande.

Pack confort

Pack de 3 accessoires à ventouses pour ajuster la position de votre patient dans le bain selon sa morphologie.



Café pieds



Coussins



Repose tête



SCEMED BY WINNCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin

Tél. : 03 20 28 04 28

Email : contact@scemed.com

