



MARINA

CHARIOT DOUCHE



HYGIÈNE



Améliorer la vie des personnes
en perte d'**autonomie**
et de ceux qui en **prennent soin**.



MARINA

CHARIOT DOUCHE

LÉGER, STABLE ET CONFORTABLE

Le chariot douche Marina est **maniable** et sécurisant.

Il est d'une **grande stabilité** anti-renversement grâce à son empattement.

Il a une **grande amplitude de levage** adaptée à tous.

Il est **maniable** et **léger** grâce à la structure en aluminium.



Scannez le QR Code
pour voir la vidéo !



CONFORT

Matelas sensation velours,
toucher extra-doux.

HYGIÈNE

Plateau relevable, matelas
anti-bactérien et anti-
rayures (sans phtalates ni
cadmium).

- 1 Matelas et appui-tête en toile anti-dérapante et anti-bactérienne munis d'une mousse dense pour un maximum de confort.
- 2 Matelas renforcé anti déformation.
- 3 Flexible 175 cm.
- 4 Hauteur réglable du plateau de 450 à 990 mm.
- 5 Châssis en aluminium très léger et très résistant - empattement pour une stabilité incomparable.
- 6 Roues diamètre 150 mm.
- 7 Freins centralisés.
- 8 Barrières 3 positions en un clic : 81 - 105 cm ou rabattable.
- 9 Inclinaison 25°.




Informations techniques

Épaisseur du matelas	20 cm
Dimensions intérieures	de 1700 à 2100 mm x 800 mm
Matelas - 3 longueurs	1700 mm, 1900 mm ou 2100 mm
Inclinaison buste	25°
Tuyau d'évacuation d'eau	Intérieur Ø 40 mm - Longueur 1750 mm
Proclive	3°
Charge maximale	205 kg
Roues	Ø 125 ou 150 mm
Batterie	2,9 Ah - 24 V DC
Freins	Semi-centralisés

Chargeur	220 V 50/60 Hz 500 mA / câble anti-arrachement
Commande de montée	Électrique ou hydraulique
Matériaux châssis	Structure en aluminium enduit et inox résistant à la corrosion
Matériaux Matelas	PVC - 4 couches non feu M2
Indice de protection	IPX6



OPTIONS

Système de frein semi-centralisé.

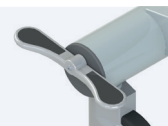

Schémas techniques

- Amplitude de levage : 45 à 99 cm.
- 1 plateau, 3 longueurs : 186 cm, 206 cm et 226 cm
- 2 largeurs : 81 cm et 105 cm.
- Protection anti-choc aux 4 coins.

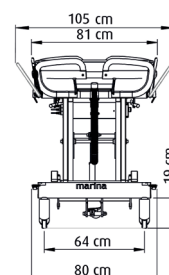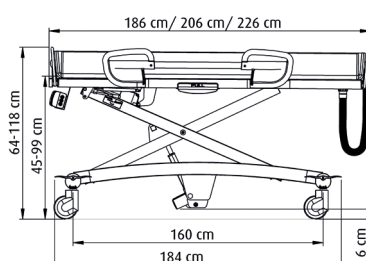

GAMME MARINA

► Marina électrique

- Relevage du buste en douceur.
- Fonctions montée et descente sur télécommande avec indicateur de batterie. Batterie rechargeable sur chargeur mural et interchangeable.
- Les commandes sont aussi disponibles sur le chariot.



VERSION PREMIUM

Système de frein centralisé + relevage du buste.
Réf. : 6100.2060

VERSION STANDARD

Système de freins individuels et absence de relevage du buste.
Réf. : 6100.2050

► Marina hydraulique

- Double pédale de chaque côté du chariot pour un accès rapide et facilité.
- Proclive et déclive par manette disponible de chaque côté du chariot.



VERSION PREMIUM

Système de frein centralisé + relevage du buste.
Réf. : 6100.2010

VERSION STANDARD

Système de freins individuels et absence de relevage du buste.
Réf. : 6100.2000



SCEMED BY WINNCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin

Tél. : 03 20 28 04 28

Email : contact@scemed.com

