





SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

GAMME MAGIC

BAIGNOIRES DE SOINS

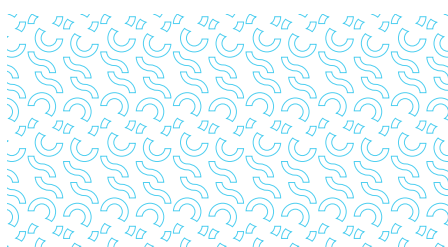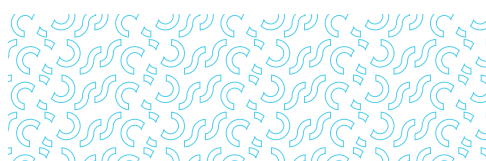

scemed.com

BAIGNOIRES GAMME MAGIC

Gamme de 4 baignoires adaptées aux soins d'hygiène et de détente.
Tous les modèles sont à hauteur variable pour effectuer les soins en position ergonomique :

MAGIC 100



MAGIC 1000



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Magic 100	Magic 1000	Magic 2000	Magic 3000
Réglage de la hauteur	✓	✓	✓	✓
Tableau de commandes tactile	✓	✓	✓	✓
Carte magnétique de mise en service	✓	✓	✓	✓
Affichage numérique de la température de remplissage et de la douchette	✓	✓	✓	✓
Réglage numérique de la température de remplissage et de la douchette	✓	✓	✓	✓
Affichage numérique de la température du bain	✓	✓	✓	✓
Descente d'urgence	0	✓	✓	✓
Vidange automatique	-	-	-	✓
Arrêt automatique du remplissage (si vidange ouverte)	-	-	-	✓
Pré-remplissage automatique	-	✓	✓	✓
Pré-remplissage auto avec 3 niveaux sélectionnables	-	-	✓	✓
Système anti-brûlure 42°C	✓	✓	✓	✓
Relâchement de la pression dans la douchette et le flexible de désinfection	-	-	✓	✓
Porte d'accès latérale	0	0	0	0

0 : option - : non disponible

LES + PRODUIT

Les baignoires Magic sont compatibles avec nos systèmes de transfert spécial bain NOVUM :



NOVUM 100 & 1000
Siège de transfert



NOVUM 200 & 2000
Brancard de transfert

MAGIC 2000



MAGIC 3000



INFORMATIONS TECHNIQUES

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

	Magic 100	Magic 1000	Magic 2000	Magic 3000
Système de désinfection standard	0	0	0	0
Système de désinfection contrôlée avec temps de contact programmable	-	-	0	0
Désinfection désactivée lorsque la baignoire est pleine	-	-	0	0
Rinçage auto de l'hydromassage après désinfection	-	-	0	0
Relâchement de la pression dans la douchette et le flexible de désinfection	-	-	✓	✓
Activation automatique des douchettes lorsqu'elles sont retirées de leur support	-	-	-	✓


SOINS

Système de distribution d'huile de bain et shampoing	0	0	0	0
Rinçage automatique du distributeur	-	-	0	0

0 : option - : non disponible

BAIGNOIRES MAGIC

Cuve à hauteur variable permettant une position de travail ergonomique. Baignoires polyvalentes pour réaliser les soins d'hygiène et proposer des programmes bien-être aux patients/résidents.

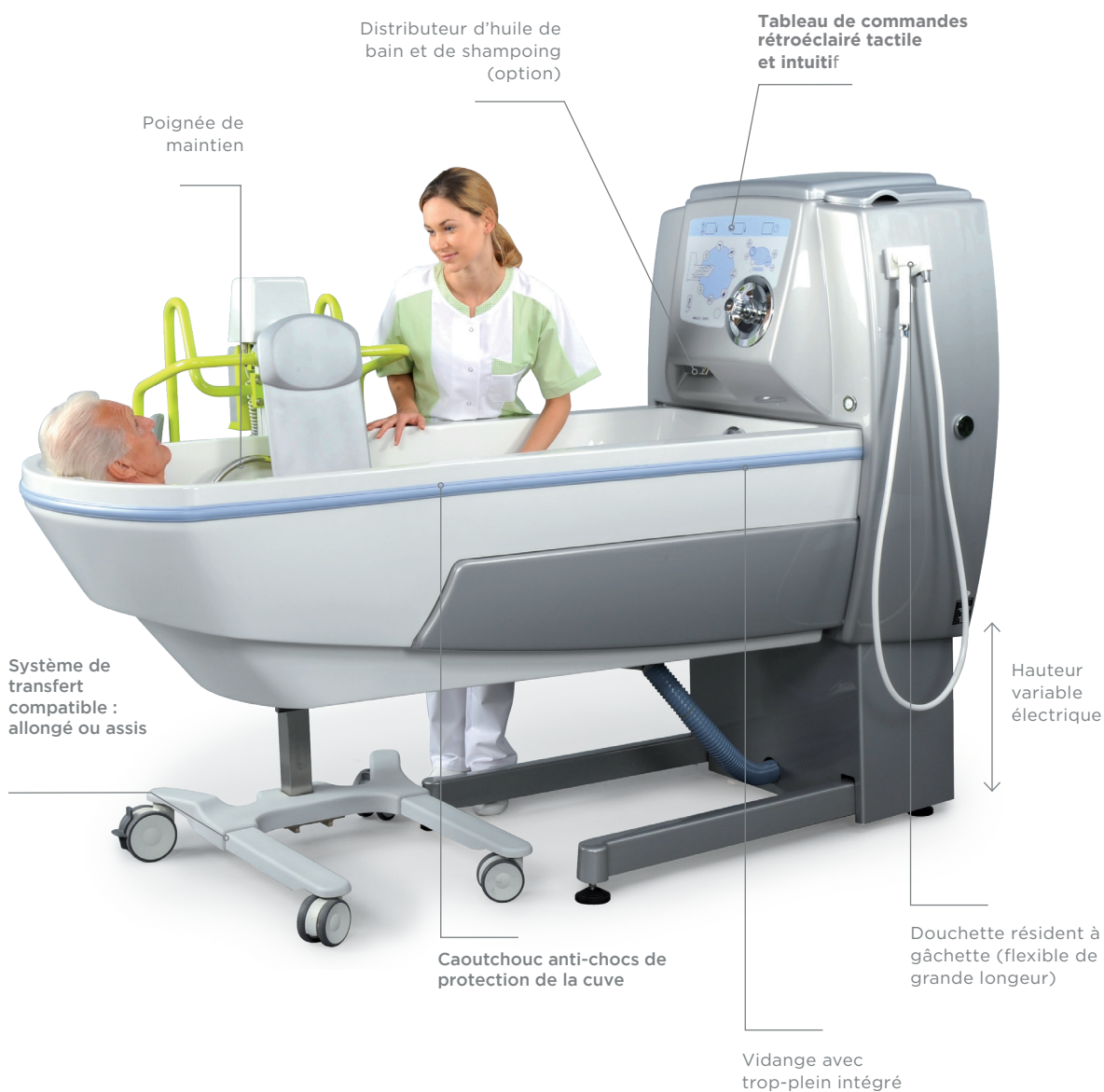

OPTIONS

Option cuve à porte pour faciliter l'accès du patient/résident.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SYSTÈME DE DESINFECTATION EXCLUSIF

- Désinfection contrôlée par temps de contact du désinfectant
- Balnéothérapie sans circuit d'eau
- Purge des jets après désinfection
- Anti légionnelle et contamination croisée

INFORMATIONS TECHNIQUES



Réglage de la hauteur	De 680 à 1080 mm
Poids de la baignoire remplie	De 380 à 500 kg selon niveau de remplissage
Consommation d'eau (avec résident)	Env 180L (capacité maximale 300L)
Longueur de cuve (3 possibilités)	1900 mm - 2224 mm (standard) - 2540 mm
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve anatomique en fibre de verre renforcé, finition gelcoat anti-bactérien • Châssis en acier • Console en ABS
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Robinetterie de marque GROHE • Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage • Sécurité anti-brûlure 42°
Approvisionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Eau chaude et froide : R raccord 3/4" • Manchon de raccordement pour l'évacuation : DN 50 • Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Batterie pour la descente d'urgence	Batterie étanche sans entretien
Normes	<p>Marquage CE selon la directive 93/42/CEE ISO 9001 (système de management de la qualité) EN60601 (appareils électro-médicaux : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles)</p>

Poignée de maintien



Coffre à produits verrouillable


SCHÉMAS TECHNIQUES

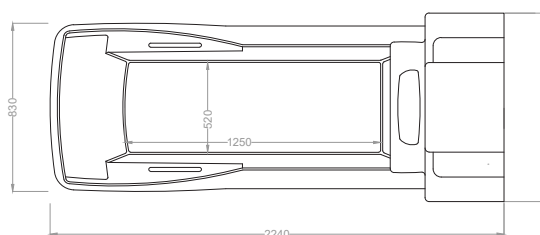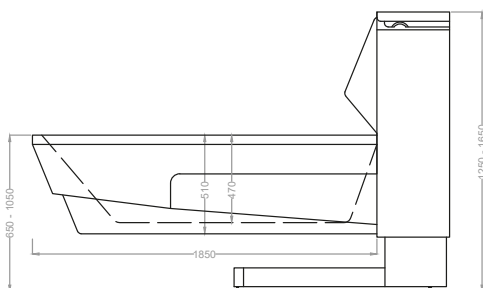

LES OPTIONS BIEN-ÊTRE

LA CHROMOTHÉRAPIE

Dispositif de soins qui utilise les couleurs dans le but de soigner le corps et l'esprit. Chaque couleur prodigue un effet psychique et physique qui participe à la sérénité et la relaxation.

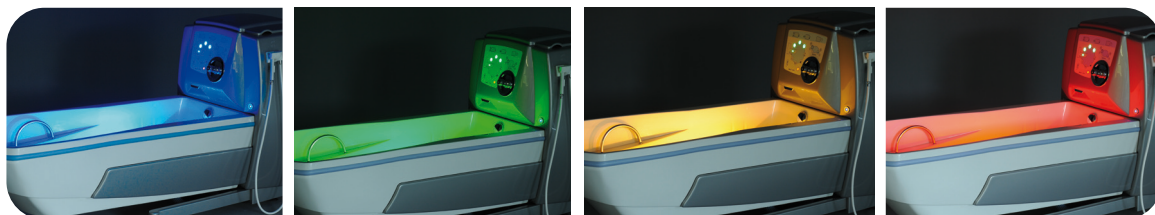

- Défilement de 7 couleurs
- Projection dans l'eau et dans l'espace de soins
- Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur aux choix
- Facile d'utilisation

L'HYDROMASSAGE

De 2 à 5 jets d'eau latéraux, avec direction et intensité ajustables (puissance également réglable par adjonction d'air).

L'action des jets d'eau améliore la condition physique de la personne qui reçoit le soin :

- Prévention des escarres,
- Diminution des douleurs musculaires, articulaires et rhumatismales,
- Amélioration de la circulation sanguine.



LA MUSICOThÉRAPIE

PERSONNALISEZ L'ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !

Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue un massage par ondes sonores. Offrant un moment de détente et d'harmonie pour le corps et l'esprit grâce aux vibrations des basses fréquences dans l'eau qui procurent un massage par ondes sonores et créent une atmosphère apaisante et une expérience unique.

LES ULTRASONS

Dispositif intégré à la cuve qui utilise les ultrasons de basses fréquences pour un soin performant et non agressif, sans friction. L'unité à ultrasons génère des millions de bulles microscopiques qui implosent pour libérer l'épiderme de ses impuretés.



Le transducteur ultrasonique de SCEMED facilite les soins d'hygiène:

- nettoyage et gommage de l'épiderme
- action uniforme et douce des ultrasons
- idéal pour les personnes à la peau fragile

CHOIX DES OPTIONS

	Magic 100	Magic 1000	Magic 2000	Magic 3000
Chromothérapie	0	0	0	0
Musicothérapie	0	0	0	0
Sound and vision (pack chromothérapie + musicothérapie)	0	0	0	0
Ultrasons	0	0	0	0
Connecteur avec tube pour massage	0	0	0	0
Hydromassage 2 jets	0	0	0	-
Hydromassage 5 jets	-	-	0	0
Hydromassage avec intensité des jets réglable	-	-	0	0
Réglage individuel des jets	-	-	-	0

0 : option - : non disponible



Nos formateurs en thérapies naturelles vous transmettent leur savoir-faire pour réaliser les soins sereinement



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com